

SPECTROCHECK^{LMM02}

台式直读光谱仪



买得起的高性能金属分析仪

SPECTROCHECK

同等价位无可比拟的高性能和可靠性

SPECTROCHECK台式直读光谱仪专为中小型黑色/有色铸造企业, 汽车零部件生产商和金属加工厂而设计。

高质量, 紧凑型买得起的直读光谱仪是日常金属材料中元素含量的理想分析工具, 可以配备钢铁, 铝合金, 铜合金等分析程序。用 SPECTROCHECK 可以确保严格要求的高质量材料获得可靠检测结果。



新性能和大幅节省氦气


最新型号兼具低运行成本和精确稳定的杰出性能。**超便捷的单标样标准化**—基于斯派克公司的iCAL智能逻辑校准专利技术。平均每天节约30分钟标准化时间。**氦气节约功能**可以在空闲时间关闭氦气, 另外在待机时间氦气消耗降低70%。新设计的**仪器内部空间**减少35%, 更加紧凑。仪器部件易于安全地接近, 方便维护维修。

付出低成本, 获得高价值

以前从未有过如此低价格的直读光谱仪能够提供这么高性能的表现。SPECTROCHECK不仅购买价格惊喜, 运行成本也低。创新的氦气节约模式, iCAL单标样智能标准化(取代连续而代价高昂的高低标再校准)。造就一台无与伦比的超高性价比直读光谱仪。

简单易用

从硬件到插件式软件功能模块, 所有的仪器功能都是精心打造。SPECTROCHECK直读光谱仪即使不具备专业知识的操作人员也容易使用和维护。

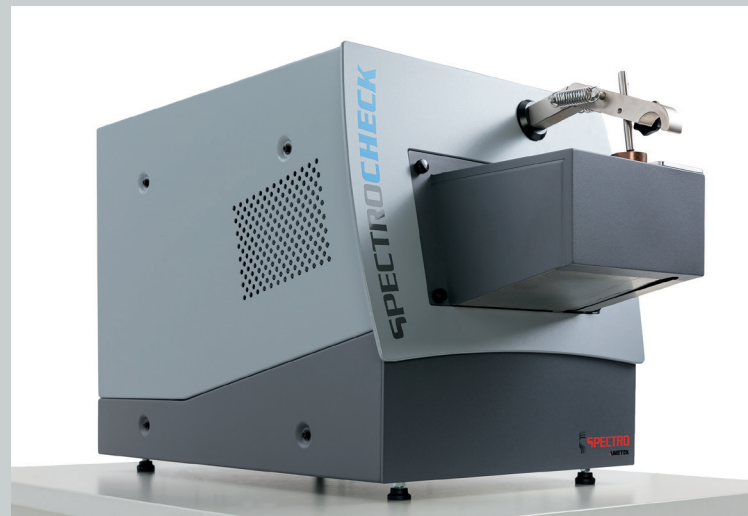

SPECTROCHECK 特性优势



台式机和笔记本电脑皆可

简单的自解释软件 — 呈现清晰, 无菜单, 按钮式操作

全新小样品夹具, 可分析 1 至 3 mm 细丝, 薄片

专利技术 iCAL 单标样再校准, 一次快速完成标准化

数字化高精度等离子发生器光源/点火器系统 — 最高激发频率 1000 Hz

改进的火花台易于使用和维护, 最重样品15公斤

实践验证的优秀光学系统: 采用CMOS检测器, 更加快速灵活

全新氩气控制阀体, 连接净化管。程序控制气流关闭, 快速启动和氩气节约模式

从两边侧面板和后面板可以简便, 安全地维护或更换部件

功能性人体工学设计, 节约 35% 内部空间

创新的光学系统

采用全新高性能专利*光学系统技术。结合了多通道固态检测器和选择性波长成像反馈技术(SWIFT)。光室独立隔离恒温确保测量稳定性。全新CMOS检测器增加了灵活度。


结果是: 高精度分析性能贯穿全部光谱范围。SPECTROCHECK为常见金属材料所需的元素配置工作曲线。因此有效减少光谱干扰, 保持高稳定性。确保复杂基体谱线的干扰分离。

软件易于操作

SPECTROCHECK直读光谱仪操作不需要具备专业技能。简单的软件界面, 无需菜单而以图标按钮操作。独特的插件式软件使得用户可以定制软件功能。包括: 控制试样, 类型标准化, 牌号识别等等功能模块。日后可以方便增加功能模块。模块选项缩减了购买成本。用户仅给需要的功能付费。

全新的氩气控制阀体配合氩气节约软件工作, 实现大幅缩减氩气消耗。用户可以免密直达方法开发软件, 并扩展工作曲线范围。标准牌号识别数据库经过扩展, 涵盖钢铁, 铝基和铜基金属。

SPECTROCHECK直读光谱仪确保用户免除复杂的操作培训。使用者面对电脑, 按照直觉引导, 简便上手操作软件。

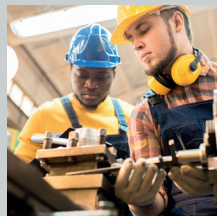

SPECTROCHECK

台式直读光谱仪



金属分析全线产品

价格合理的高性能SPECTROCHECK在金属分析仪全线产品中占有其相应的生态位。新型号的性能提升,使其加入斯派克旗舰产品SPECTROLAB S带领的高精度分析光谱仪队列。其中主力还有斯派克公司的畅销直读光谱仪SPECTROMAXx。金属分析领域还有SPECTROPORT便携式光谱仪,以及SPECTROTEST移动式光谱仪。无论哪个型号,斯派克公司40多年的光谱仪经验,伴随无出其右的技术创新的引领,确保其行业的领导力。

超级强大的售后服务支持团队

金属制造企业有赖于连续运行的分析仪器。我们的AMECARE服务计划及时地为用户提供可靠的售后服务支持。该计划在全球50多个国家,由数百位专业工程师提供服务。在中国有30多位专职工程师分布在各地服务网点。

他们为用户提供高价值的定制服务。帮助持续优化仪器性能和尽可能延长仪器使用寿命。SPECTRO PROTEKT包括预防性维护合同,应用解决方案,专家咨询和定制培训,远程故障诊断等内容。还可以提供在线和现场演示及测试样品。



* 专利号: DE 11 2014 007 078
DE 11 2014 007 080
DE 10 2007 027 010; US8,649,009

www.spectro.com.cn

阿美特克集团-德国斯派克分析仪器公司

上海

地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特东三路526号(区地块)1幢二层A1、A4部位

传真: 021-58660969
spectro-china.sales@ametec.com

北京

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方总部大厦(B10)二层西侧

传真: 010-85262338
spectro-china.sales@ametec.com

广州

地址: 广州市越秀区东风东路767号东宝大厦810单元

传真: 020-83633701
spectro-china.sales@ametec.com

成都

地址: 成都市锦悦西路26号高新孵化9号楼F座10楼9-10号

传真: 028-86758141
spectro-china.sales@ametec.com



公司热线: 400-022-7699

官方微信:

